


SUPER HAFTCREME

FÜR VOLL- UND TEILPROTHESEN

- schnelle Wirkung
- Krümelschutz
- erhöhter Tragekomfort

MEDIZINPRODUKT

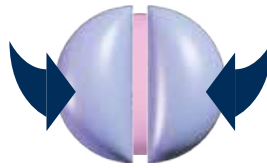

EXTRA STARK

BI
LIFE | DENT

Ein unsicheres Gefühl bei den dritten Zähnen? Da sagen wir: Halt! Die **BI LIFE DENT Haftcreme** ist extra stark und bietet über lange Zeit zuverlässig Halt – und zwar bei Voll- und Teilprothesen. Durch die elastische Polsterung zwischen Zahnfleisch und Prothese erhöht sich der Tragekomfort. Die Haftcreme hilft zusätzlich, das Eindringen von Speiseresten unter die Prothese zu verhindern (Krümelschutz). Der angenehme Minzgeschmack sorgt für ein frisches Mundgefühl und schon gehen Sie unbeschwert lächelnd durchs Leben.

Anwendung



1. Prothese gründlich reinigen und gegebenenfalls mit einer Bürste nacharbeiten.



2. Prothese vollständig abtrocknen.



3. Haftcreme in dünnen Streifen oder Punkten mit ca. 1 cm Abstand entlang des Prothesenrands auftragen.




4. Prothese einsetzen, ein paar Sekunden andrücken und für ca. 5 Minuten nichts essen und trinken.



5. Quillt nach dem Einsetzen Haftcreme heraus, bei der nächsten Anwendung weniger Haftcreme auftragen.



6. Zur Entfernung von Rückständen Tuch in Speiseöl tränken und damit Prothese reinigen.

 **Hinweise:** Bitte alle Hinweise sorgfältig lesen, beachten und zum Nachlesen aufbewahren. Haftcreme nicht direkt in den Mund geben. Haftcreme außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Es darf keine Flüssigkeit in die Tube eindringen und die Tubenöffnung muss immer trocken sein. Tube immer gut verschließen und an einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren. Haftcreme nicht verwenden, wenn gegen einen der Inhaltsstoffe eine Überempfindlichkeit vorliegt. Den Sitz der Prothese regelmäßig vom Zahnarzt überprüfen lassen. Schwerwiegende Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

INHALTSSTOFFE: CELLULOSE GUM, HYDROGENATED POLYDECENE, CALCIUM/SODIUM PVM/MA COPOLYMER, HYDROGENATED STYRENE/ ISOPRENE COPOLYMER, AROMA, LIMONENE, TOCOPHEROL.

 **Mit besonderer Sorgfalt hergestellt von**
etol Gesundheitspflege- und Pharmaprodukte GmbH
Konrad-Adenauer-Straße 3, D-77704 Oberkirch,
info@product-services.de, Tel: +49 2241-23406-0

Bei Rückfragen sind wir gerne für Sie da!
BIPA-SERVICELINE: 0800 207 007
(kostenlos in Österreich)
BIPA Parfumerien Gesellschaft m.b.H.,
IZ NÖ-Süd, Straße 3, Objekt 16, A-2355 Wr. Neudorf

40g e



0483



REV1/2024-03-01 PS-LAN: ZR0048